


tBioDx™ HPV ExtendScreen™ PCR Kit



کیت مخصوص شناسایی و ژنوتایپینگ HPV و غربالگری سرطان دهانه رحم

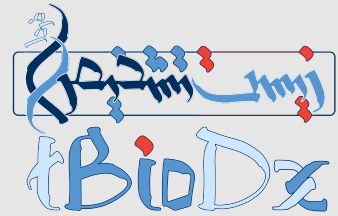

- تشخیص همزمان ۱۴ ژنوتیپ با ریسک بالای ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)
- ژنوتایپینگ همزمان ۷ نوع High Risk-HPV
- استفاده از انکوژنهای E6 و E7 برای تشخیص HPV
- صحه گذاری شده بر روی LBC و Self-Collected Vaginal Swab

• در کیت tBioDx™ HPV ExtendScreen™ Kit از روش real-time PCR برای تشخیص کیفی ۱۴ نوع ویروس با ریسک بالای پاپیلومای انسانی (HPV) استفاده می شود: ۱۶، ۱۸، ۳۱، ۳۳، ۳۵، ۳۹، ۴۵، ۵۱، ۵۲، ۵۶، ۵۸، ۵۹، ۶۶ و ۶۸. این کیت برای غربالگری سرطان دهانه رحم، تشخیص و ژنوتایپینگ HPV در بانوان بین ۲۵ تا ۶۵ سال طراحی و صحه گذاری شده است.



- استفاده از نواحی حفاظت شده ی ژن های E6 و E7 برای هر ۱۴ ژنوتیپ HPV
- شناسایی ۱۴ ژنوتیپ با ریسک بالای HPV و ژنوتایپینگ همزمان ۷ ژنوتیپ ۱۶، ۱۸، ۳۱، ۳۳، ۳۵، ۴۵، ۵۲ و ۵۸
- صحه گذاری شده با دو روش استخراج مبتنی بر ستون سیلیکا (QIAGEN) و ذرات مگنتیک با قابلیت خودکارسازی (tBioDx™)



- صحه گذاری شده مبتنی بر Meijer Guideline برای دو روش نمونه گیری:
- حساسیت کلینیکال ۹۸/۸۴٪ (برای LBC، با بررسی ۸۲۶ نمونه ی CIN1 یا کمتر)
- ویژگی کلینیکال ۹۶/۳۰٪ (برای LBC، با بررسی ۷۱ نمونه CIN2+)
- حساسیت کلینیکال ۹۸/۱۹٪ (برای FLOQSwab، با بررسی ۸۲۵ نمونه ی CIN1 یا کمتر)
- ویژگی کلینیکال ۹۶/۲۳٪ (برای FLOQSwab، با بررسی ۷۰ نمونه ی CIN2+)



شماره کاتالوگ	محصول
412100-025	tBioDx™ HPV ExtendScreen™ PCR Kit (25)
412100-100	tBioDx™ HPV ExtendScreen™ PCR Kit (100)
611400-50	tBioCare™ HPV DNA Extraction Kit (50)

شرکت زیست تشخیص فردا

www.tbiodx.com